




(제네제어 브리즈헬러 / 블리스터포장 / 분말캡슐)
제네제어 브리즈헬러
분말캡슐

유통처명


SILVANOVA




에너제어 브리즈헬러를 사용하기 전에 전체 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.

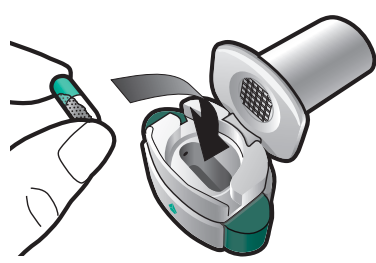


캡슐을 넣습니다

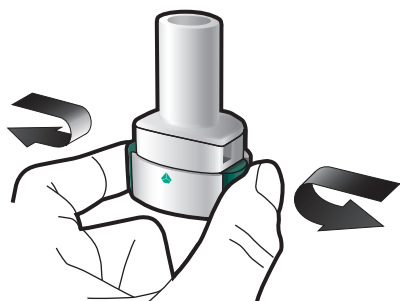

구멍을 뚫고 손을 땁니다

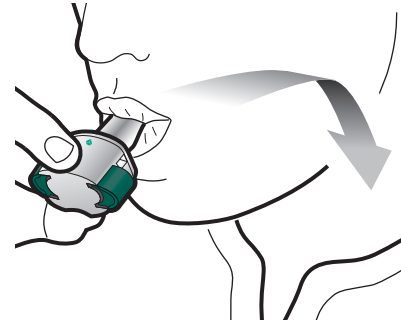

깊게 들이마십니다

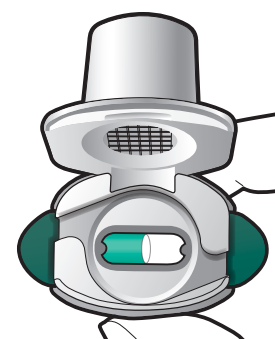


캡슐이 비어 있는지 확인합니다

1


2

3


확인

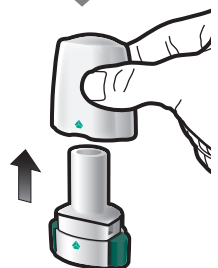


단계 1a:
흡입기 뚜껑을 위로 당겨 분리합
니다.

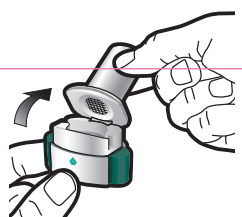


단계 1b:
흡입기를 엽니다.

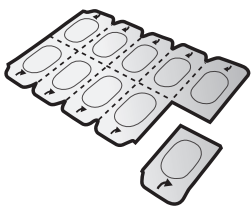


단계 1c:
캡슐을 꺼냅니다.
블리스터 한 개를 뜯은 후 보호
필름을 벗기고 캡슐을 꺼냅니다.
이 때 캡슐을 호일 쪽으로 눌러서
는 안 됩니다.
캡슐을 삼켜서도 안 됩니다.

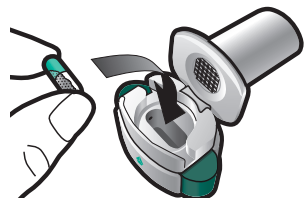


단계 1d:
캡슐을 넣습니다.
절대 흡입구에 바로 캡슐을 넣지 마
십시오.

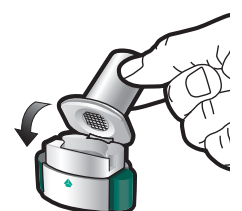

단계 1e:
흡입기를 닫습니다.

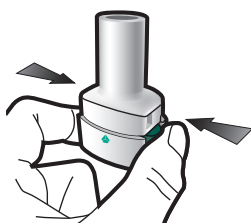

단계 2a:
캡슐을 한 번 뚫습니다.
흡입기를 똑바로 세우고 측면
버튼을 동시에 완전히 눌러 캡슐을
뚫습니다.
캡슐이 뚫릴 때 “딱” 소리가 나야
합니다.
캡슐은 한 번만 뚫어야 합니다.

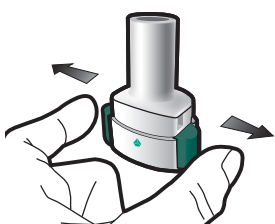

단계 2b:
눌렀던 측면 버튼에서 손을 땁니
다.



단계 3a:
숨을 완전히 내쉽니다.
흡입구로 숨을 내쉬어서는 안 됩니
다.



단계 3b:
약물을 깊이 흡입합니다.
그림과 같이 흡입기를 잡습니다.
흡입구를 입에 넣고 그 주위를 입술
로 꼭 씹니다.
측면 버튼을 눌러서는 안 됩니다.
가능한 한 깊고 빠르게 호흡합니다.
흡입하는 동안 웅 하는 소리가 날
것입니다.
흡입하면서 약물의 맛을 느낄 수 있
습니다.



단계 3c:
숨을 참습니다.
최대 5초 동안 숨을 참습니다.

단계 3d:
입을 행굽니다.
1회 투약 후 마다 물로 입을 행구
고 뱉습니다.



캡슐이 비어 있는지 확인합니다.
흡입기를 열어서 캡슐 안에 분말이
남아 있는지 확인합니다.

캡슐 안에 분말이 남아 있는 경우:
• 흡입기를 닫습니다.
단계 3a에서 3d까지 반복합니다.



비어있는 캡슐을 제거합니다.
비어있는 캡슐을 쓰레기통에 버림
니다.


흡입기를 닫고 뚜껑을 씹습니다.

중요한 정보

- 에너제어 캡슐은 항상 블리스터
내에 보관되어야 하고, 사용 직전
에 이를 꺼내야 합니다.
- 블리스터에서 호일 쪽으로 캡슐
을 눌러 꺼내서는 안 됩니다.
- 캡슐을 삼켜서는 안 됩니다.
- 다른 흡입기를 이용하여 에너제
어 캡슐을 사용해서는 안 됩니다.
- 다른 캡슐 의약품을 투여하기 위
해 에너제어 브리즈헬러 흡입기
를 사용해서는 안 됩니다.
- 캡슐을 입이나 흡입기의 흡입구
에 넣어서는 안 됩니다.
- 양쪽 버튼을 두 번 이상 눌러서는
안 됩니다.
- 흡입구를 붙여서는 안 됩니다.
- 흡입구로 흡입할 때 측면 버튼을
눌러서는 안 됩니다.
- 젖은 손으로 캡슐을 만져서는 안
됩니다.
- 흡입기를 물로 씻어서는 안 됩니
다.

에너제어 브리즈헬러 팩은 다음을 포함하고 있습니다:

- 브리즈헬러 흡입기 1개
- 흡입기에 사용할 캡슐 10개가 각각 들어 있는 낱알모음포장(블리스터) 1개 이상

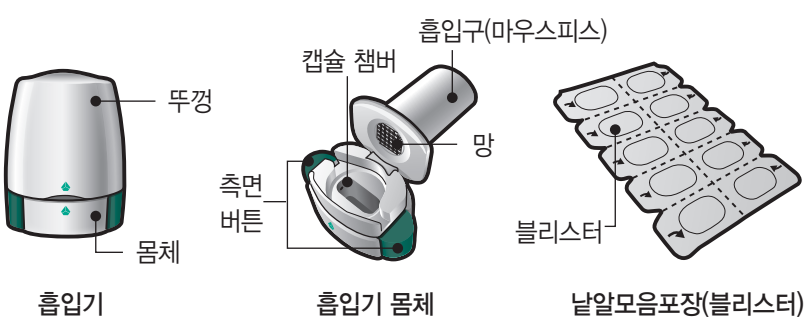

자주 묻는 질문

- 흡입할 때 흡입기에서 소리가 나지 않는 이유는 무엇인가
요?
캡슐이 캡슐 챔버에 붙어 있을 수 있습니다. 이 경우, 흡입
기 몸체를 두드려 조심스럽게 캡슐을 떼어냅니다. 사용지
침의 단계 3a에서 3d까지 반복하여 약물을 다시 흡입합니
다.
- 캡슐 안에 분말이 남아 있는 경우 어떻게 해야합니까?
귀하는 약물을 충분히 흡입하지 못한 상태입니다. 흡입기
를 닫고 사용지침의 단계 3a에서 3d까지 반복해야 합니다.
- 흡입 후 기침을 했습니다 - 문제가 됩니까?
이런 일이 있을 수 있습니다. 캡슐이 비어있는 한, 귀하는
약물을 충분히 흡입한 상태입니다.
- 혀에 작은 캡슐 조각을 느꼈습니다 - 문제가 됩니까?
이런 일이 있을 수 있지만 유해하지 않습니다. 캡슐을 두
번 이상 뚫을 경우 캡슐이 작은 조각으로 부서질 가능성이
높아집니다.

흡입기 세척:

깨끗하고 보풀이 없는 마른
천으로 흡입구 안팎을 닦아,
분말 잔여물을 제거합니다.
흡입기를 건조시킵니다. 흡
입기를 물로 씻어서는 안 됩
니다.

사용 후 흡입기 폐기:

모든 캡슐을 사용한 후에는
각 흡입기(브리즈헬러)를 폐
기해야 합니다. 더 이상 필
요하지 않은 캡슐 및 흡입
기를 어떻게 처리해야 하는
지 귀하의 약사에게 문의하
십시오.

